

Βελονισμός & Μοξοθεραπεία

Η άλλη εναλλακτική.....



Κατάλογος προϊόντων

Ερευνητικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος

Αγαπητοί βελονιστές

Το **ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ**, είναι μια εισαγωγική εταιρεία βελονών και αναλωσίμων βελονισμού, αλλά και ιατρικών & παραϊατρικών αναλώσιμων προϊόντων, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από το 2000. Χάρη στην προτίμηση και την αμέριστη συμπαράστασή σας, διατηρούμε την υγιή μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια και με τελικό σκοπό να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, για μια σειρά προϊόντων απαραίτητων για εσάς τους επαγγελματίες. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το **νέο μας κατάλογο "Βελονισμός & Μοξοθεραπεία"**. Πλήρως ανανεωμένος, με πληθώρα νέων προϊόντων, απευθύνεται σε όλους τους βελονιστές που αναζητούν μια ολοκληρωμένη σειρά **αναλωσίμων βελονισμού και μοξοθεραπείας**. Με πρόσθετο φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή των προϊόντων, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για κάθε επαγγελματία.

Η διαρκής αναζήτηση νέων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και οι συνεργασίες μας με τους γνωστότερους οίκους του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Συνέπεια, σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, αποτελούν για εμάς πρωταρχικούς στόχους σε κάθε μας συνεργασία.

Εκ της Εμπορικής Διαχείρισης

Περιεχόμενα

| | |
|----------------------------------|----|
| ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ | 01 |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ | 09 |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 14 |
| ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ | 29 |
| ΜΟΞΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | 33 |
| ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΧΑΡΤΕΣ | 41 |

Βελόνες βελονισμού

Διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα βελονών βελονισμού, μόνο υψηλής ποιότητας, σε χαμηλές τιμές και σε ακόμη χαμηλότερες, μέσω της ειδικής προσφοράς σε αγορά συγκεκριμένων ποσοτήτων.



Μάρκα: Ener-Qi

Χαρακτηριστικά: ΜΕ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, επάργυρη λαβή και σπειροειδή κεφαλή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.



| Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---------|---------------|--------|
| AM0001 | 0,16mm X 13mm | € 4,04 |
| AM0003 | 0,26mm X 25mm | € 4,04 |
| AM0005 | 0,30mm X 25mm | € 4,04 |
| AM0004 | 0,26mm X 40mm | € 4,04 |
| AM0006 | 0,32mm X 50mm | € 4,04 |
| AM0253 | 0,30mm X 75mm | € 4,04 |

Χαρακτηριστικά: ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, επάργυρη λαβή και σπειροειδή κεφαλή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.



| Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---------|---------------|--------|
| AM0022 | 0,26mm X 25mm | € 4,04 |
| AM0252 | 0,18mm X 13mm | € 4,04 |

Χρήση: Ιδανική για βελονισμό του προσώπου, λόγω και των πολύ μικρών διαστάσεων της.

Χαρακτηριστικά: ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι και χωρίς κεφαλή. Η επιστροφή σιλικόνης βοηθάει στην ανώδυνη εισαγωγή της βελόνας.


Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.



| Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---------|----------------|--------|
| AM0243 | 0,16mm X 6,5mm | € 4,04 |

Χαρακτηριστικά: ΜΕ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς κεφαλή.


Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------|
|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
| | AM0007 | 0,30mm X 75mm | € 4,04 |

Χρήση: Ενδείκνυται για τόνωση των σημείων βελονισμού λόγω της επικάλυψης χρυσού.


Χαρακτηριστικά: ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, επικάλυψη χρυσού και σπειροειδή κεφαλή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------|
|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
| | AM0026 | 0,22mm X 13mm | € 8,07 |
| | AM0170 | 0,26mm X 25mm | € 8,07 |
| | AM0171 | 0,20mm X 6,5mm | € 8,07 |

Χρήση: Ημιμόνιμη βελόνα (πινεζάκι), για τον ωτοβελονισμό.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων με 100 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου του ωτός.

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------|
|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
| | AM0032 | 0,22mm X 1,5mm | € 8,07 |

Μάρκα: ENERGY


Χαρακτηριστικά: ΜΕ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς κεφαλή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---|---------|----------------|--------|
| | AM0010 | 0,20mm X 13mm | € 4,04 |
| | AM0009 | 0,16mm X 15mm | € 4,04 |
| | AM0011 | 0,20mm X 25mm | € 4,04 |
| | AM0012 | 0,25mm X 25mm | € 4,04 |
| | AM0015 | 0,30mm X 25mm | € 4,04 |
| | AM0014 | 0,30mm X 30mm | € 4,04 |
| | AM0013 | 0,25mm X 40mm | € 4,04 |
| | AM0016 | 0,30mm X 40mm | € 4,04 |
| | AM0017 | 0,30mm X 50mm | € 4,04 |
| | AM0018 | 0,30mm X 75mm | € 4,04 |
| | AM0019 | 0,30mm X 100mm | € 5,65 |

Χαρακτηριστικά: ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς κεφαλή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---|---------|---------------|--------|
| | AM0024 | 0,25mm X 25mm | € 4,04 |

Χαρακτηριστικά: ΜΕ 1 ΟΔΗΓΟ/ 10 βελόνες. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς κεφαλή.


Συσκευασία: Κυτίο 500 τεμαχίων, (δέκα βελόνες - ένας οδηγός) σε πλαστική, διάφανη συσκευασία.

|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---|---------|---------------|---------|
| | AM0021 | 0,25mm X 25mm | € 16,50 |

Μάρκα: ACIMUT

Χαρακτηριστικά: ΜΕ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, επάργυρη λαβή και σπειροειδή κεφαλή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---|---------|---------------|--------|
| | AM0211 | 0,25mm X 25mm | € 4,04 |
| | AM0212 | 0,26mm X 40mm | € 4,04 |

Χαρακτηριστικά: ΜΕ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, από ανοξείδωτο ατσάλι, επάργυρη λαβή και σπειροειδή κεφαλή. Με επίστρωση σιλικόνης για ανώδυνη εισαγωγή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία .


|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τύπος | Τιμή |
|--|---------|---------------|---------|--------|
| | AM0254 | 0,16mm X 13mm | basic + | € 4,04 |

Μάρκα: MESO-RELLE

Χρήση: Η ειδικά σχεδιασμένη βελόνα (σχήμα διαμαντιού), για χρήση στην Ηλεκτρολιπόλυση.

Χαρακτηριστικά: ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα και αποστειρώνεται με οξείδιο του αιθυλενίου. Η άκρη σε σχήμα διαμαντιού, εξασφαλίζει την ευκολία της διείσδυσης. Η ολίσθηση διευκολύνεται χάρη στο εξαιρετικό φινίρισμα του ιατρικού ατσαλιού.

Συσκευασία: Κυτίο 300 τεμαχίων. Ανά 12 βελόνες, σε πλαστική διάφανη συσκευασία.

|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
|---|---------|----------------|-------|
| | AM0251 | 0,30mm X 100mm | € 140 |

Μάρκα: SEIRIN

Χρήση: Η ειδικά σχεδιασμένη βελόνα για χρήση στην **κοσμητική ιατρική και τον αισθητικό βελονισμό**, της ιαπωνικής εταιρείας SEIRIN.


Χαρακτηριστικά: ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ. Αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι και εργονομικά σχεδιασμένη πλαστική λαβή. Η εισδοχή της είναι πολύ εύκολη και σχεδόν ανώδυνη για τον ασθενή.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, διάφανη συσκευασία.

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------|
|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τύπος | Τιμή |
| | AM0213 | 0,16mm X 15mm | B type κόκκινο | € 11 |

Χρήση: Ημιμόνιμη βελόνα **Pyonex** κυρίως για τον ωτοβελονισμό, αλλά και το σωματοβελονισμό. Υψηλής ποιότητας και με ισχυρό αυτοκόλλητο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ίδια σημεία βελονισμού μετά από συμβατική θεραπεία με απλές βελόνες, διατηρώντας την αποτελεσματικότητα της θεραπείας για μεγαλύτερο διάστημα.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική, συσκευασία.

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τύπος | Τιμή |
| | AM0028 | 0,2mm X 1,5mm | pyonex - ρόζ | € 20,16 * |
| | AM0172 | 0,2mm X 1,2mm | pyonex - μπλέ | € 20,16 * |
| | AM0029 | 0,2mm X 0,9mm | pyonex - πράσινο | € 20,16 * |
| | AM0031 | 0,2mm X 0,6mm | pyonex - κίτρινο | € 20,16 * |
| | AM0030 | 0,2mm X 0,3mm | pyonex - πορτοκαλί | € 20,16 * |

* Η τιμή περιλαμβάνει έκπτωση και ισχύει μόνο για τους επαγγελματίες υγείας.

Αρχική τιμή: 24,20€.

Μάρκα: ASP

Χρήση: Ημιμόνιμη βελόνα **ASP** για τον ωτοβελονισμό. Είναι τοποθετημένη εντός ενός μικρού πλαστικού εμφόλου, που στο πίσω μέρος του, φέρει μαγνήτη για διέγερση του σημείου του ωτός, στο οποίο είναι τοποθετημένη η βελόνα. Διατίθεται σε δύο τύπους, σε steel (ατσάλι) και gold (επικαλυμμένες με χρυσό, για τόνωση των σημείων βελονισμού και αλλεργικούς ασθενείς).

Συσκευασία: Κυτίο 80 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική συσκευασία και 120 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου του ωτός.



| <u>Κωδικός</u> | <u>Τύπος</u> | <u>Τιμή</u> |
|----------------|--------------|-------------|
| AM0034 | Ατσάλι | € 28,23 |
| AM0036 | Επίχρυση | € 32,26 |

Χρήση: Ημιμόνιμη βελόνα **ASP** για τον ωτοβελονισμό. Είναι τοποθετημένη εντός ενός μικρού πλαστικού εμφόλου που στο πίσω μέρος του φέρει μαγνήτη, για διέγερση του σημείου του ωτός, στο οποίο είναι τοποθετημένη η βελόνα.

Συσκευασία: Κυτίο 200 τεμαχίων σε ατομική, πλαστική συσκευασία και 240 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου του ωτός.




| <u>Κωδικός</u> | <u>Τύπος</u> | <u>Τιμή</u> |
|----------------|--------------|-------------|
| AM0035 | Ατσάλι | € 68,55 |

Μάρκα: Jiajian

Χρήση: Ημιμόνιμη βελόνα (πινεζάκι), κυρίως για τον ωτοβελονισμό, αλλά και το σωματοβελονισμό.

Συσκευασία: Κυτίο 100 τεμαχίων με 100 καφέ αυτοκόλλητα επικάλυψης του σημείου του ωτός.

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------|
|  | Κωδικός | Διαστάσεις | Τιμή |
| | AM0033 | 0,22mm X 1,5mm | € 8,07 |

Ειδική Προσφορά

Για αγορά **συγκεκριμένης ποσότητας** βελονών βελονισμού, παρέχουμε ειδικές τιμές ανά κυτίο:

| ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΕΙΔΟΣ | Τιμή |
|---|-------------|
| 1-24 κυτία | € 4,04 |
| 25 - 49 κυτία** | € 3,95 |
| 50 - 99 κυτία** | € 3,85 |
| 100 και άνω** | € 3,75 |
| 25 και άνω κυτία (Κωδ: AM0019) 0,30mm X 100mm | € 5,15 |

**** Η προσφορά ισχύει για τα κυτία βελονών αξίας € 4,04.**

Στις ανωτέρω τιμές της κατηγορίας **Βελόνες βελονισμού**, δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%).

Αναλώσιμα βελονισμού



Dermal needles (Σφυράκι με 12 ανταλλακτικές κεφαλές)



AM0037 € 12,10



AM0038 € 12,10

Η θεραπεία με τις **dermal** βελόνες είναι βασισμένη στη θεωρία των μεσημβρινών. Χρησιμοποιώντας πολλές κοντές βελόνες και τρυπώντας ελαφρά, συγκεκριμένα σημεία του σώματος, Η θεραπεία με τις **dermal** βελόνες επιτυγχάνει:

- Αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος για την ανακούφιση από τον πόνο.
- Ισορροπία μεταξύ yin και yang.
- Τέντωμα των μυών και εξομάλυνση των φλεβών.
- Αποβολή των τοξινών.
- Προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος Qi (τσι).

Δοχείο απόρριψης βελονών



Απαραίτητο για την απόρριψη μολυσμένων και αιχμηρών υλικών, όπως βελόνες βελονισμού κ.λ.π.

AM0039 2 λίτρων € 2,44

AM0040 4 λίτρων € 4,06


Αυτοκόλλητες ταινίες για ASP βελόνες




AM0041 600 τεμάχια € 16,13

Πρόσθετες αυτοκόλλητες ταινίες, για τις ημιμόνιμες βελόνες ωτός ASP.


Λογισμικό ωτός (CD-Rom) - Natom Viewer

| | |
|---|---|
|  | <p>Το Natom Viewer είναι ένα γρήγορο και απλό στη χρήση ανατομικό λογισμικό. Σχηματική αναπαράσταση της ανατομίας του ωτός με άμεση οπτικοποίηση των ωτικών σημείων, (Μεσόδερμα - Ενδόδερμα - Εξώδερμα) και απεικόνιση όλων των κύριων σημείων. Παρουσίαση διαφόρων τεχνικών ανίχνευσης σημείων και επεξήγηση των συγκεκριμένων σημείων, στη θεραπεία των διαταραχών πόνου, του συνδρόμου του άγχους, σε εθιστική συμπεριφορά σε ασθένειες με αλλεργικά στοιχεία και σε περιπτώσεις νευραλγίας τριδύμου.</p> |
| <p>AM0042 € 50</p> | <p>Αυτή η ειδική έκδοση περιέχει 100 ανατομικά σχέδια με διεθνής ονοματολογία. Περιλαμβάνεται η δυνατότητα προβολής των σχεδίων, με αναγραφόμενη την ονοματολογία ή χωρίς, (πατώντας το πλήκτρο L). Δυνατότητα επιλογής προβολής της ονοματολογίας σε τρεις γλώσσες, (Αγγλική - Γαλλική - Γερμανική).</p> |


Μεταλλικοί σβώλοι με αυτοκόλλητο "ITO"

| | |
|---|---|
|  | <p>Εφαρμόζονται στην ωτοθεραπεία. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι δεν εισάγονται μέσα στο δέρμα και αυτό προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στους ασθενείς. Παράλληλα έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τις βελόνες ωτός, λόγω της πίεσης που ασκούν συνεχώς στο σημείο θεραπείας.</p> |
| <p>AM0043 - Ø 1,2mm 300 τεμάχια € 12,10</p> | <p>Αυτοί οι μικροί μεταλλικοί σβώλοι κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι. Πιέζοντας αυτούς πάνω στο δέρμα παράγεται μια ιοντική αντίδραση πάνω στο σημείο εφαρμογής.</p> |

Σπόροι βοτάνων με αυτοκόλλητο

| | |
|---|---|
|  | <p>Εφαρμόζονται στα σημεία του ωτός ασκώντας πίεση στο δέρμα. Έτσι διεγείρεται το σημείο, ενώ παράλληλα απελευθερώνονται ευεργετικές ουσίες βοτάνων. Είναι γνωστοί με το όνομα "Vacaria". Δεν παράγουν κανένα τύπο αλλεργίας.</p> |
| <p>AM0044 - Ø 1,2mm 300 τεμάχια € 8,06</p> | |



Pressure Feeler - Ανιχνευτής πίεσης (Μπλε, 250 γρ.)

| | |
|---|---|
|  <p>The image shows a long, thin, silver-colored metal tool with a blue handle and a blue tip. The brand name 'Sedatonic' is visible on the handle.</p> | <p>Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των επώδυνων σημείων στο περύγιο του ωτός, ασκώντας σταθερή πίεση ισοδύναμη με 250 γραμμάρια. Αποτελεί βασικό εργαλείο στην ωτοθεραπεία.</p> |
| <p>AM0045 € 24,19</p> | |



EASYO 1 - Multi pressure feeler

| | |
|---|--|
|  <p>The image shows a handheld device with a white handle and a blue sensor tip. The brand name 'EASYO 1' is visible on the handle.</p> | <p>Χρήση: Το Easyo 1 είναι ένα καινοτόμο και πρακτικό εργαλείο για την ωτοθεραπεία. Αντικαθιστά τα μεμονωμένα pressure feelers, καθώς μπορείτε να έχετε τρεις ανιχνευτές σε μια συσκευή μόνο. Είναι ένας ανιχνευτής σημείων ωτοβελονισμού, ο οποίος δρα δια μέσω του πόνου ή του παλμού (ωτοϊατρική). Ανιχνεύει τα σημεία του ωτός σαν απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις, οι οποίες διατηρούνται σταθερές κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Χρωματισμένοι δείκτες σας βοηθούν να εκτιμήσετε με ακρίβεια το επίπεδο της πίεσης.</p> <p>Έχει 3 επίπεδα πίεσης:</p> <ul style="list-style-type: none">• 130 γρ. Ένδειξη μαύρου χρώματος. Για την ανίχνευση του μεσαίου ιστού στην ωτοϊατρική. Θα αναλύσετε την αντίδραση του Σφυγμού Nogier (που ονομάζεται RAC ή VAS), για να δείτε αν το σημείο είναι ενεργό ή όχι.• 250 γρ. Ένδειξη μπλε χρώματος. Χρησιμοποιείται στην ωτοθεραπεία για την ανίχνευση των επώδυνων σημείων, στα εξωτερικά σημεία και το λοβό του αυτιού.• 400 γρ. Ένδειξη πορτοκαλί χρώματος. Για την ανίχνευση των μη ευαίσθητων, σκληρών περιοχών του ωτός, που ανταποκρίνονται δυσκολότερα. |
| <p>AM0224 € 45</p> | |

Ear stamp wood No2

| | |
|--|---|
|   | <p>Σφραγίδα για το αυτί ξύλινη. Χρήσιμη κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης του περυγίου του ωτός. Σας επιτρέπει να καταγράφετε τα σημεία που θα ανιχνεύετε.</p> |
| <p>AM0047 € 40,32</p> | |

Ear stamp Self - inking No1

| | |
|---|---|
|   | <p>Σφραγίδα για το αυτί με δικό της μελάνι. Χρήσιμη κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης του περυγίου του ωτός. Σας επιτρέπει να καταγράφετε τα σημεία που θα ανιχνεύετε. Αυτονομία μελανιού, ως 20.000 αντίγραφα του ωτός.</p> |
| <p>AM0048 € 44,36</p> | |

Ωθητήρας βελονών

| | |
|---|---|
|  | <p>Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό. Η χρήση αυτού του ωθητήρα βελονών είναι ανώδυνη και χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της εισαγωγής βελονών βελονισμού.</p> <p>Προτεινόμενες βελόνες διαστάσεων: 0,16mmX6,5mm (κωδ: AM0243).</p> |
| <p>AM0244 € 20,16</p> | |

Συσκευές Βελονισμού & Εξαρτήματα



Ηλεκτροβελονισμός & Ηλεκτρολιπόλυση

AGISTIM DUO



Το **AGISTIM DUO** είναι συσκευή ηλεκτρικής διέγερσης των σημείων βελονισμού και των αντανακλαστικών ζωνών του δέρματος, με τη χρήση βελονών. Εναλλακτικά η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδερμική ηλεκτρική νευροδιέγερση (TENS).

AM0050 € 1500

Το AGISTIM DUO χρησιμοποιείται ευρέως:

- **Στον ηλεκτροβελονισμό:** ταχύτερη θεραπεία απ' ότι μόνο με βελόνες.
- **Στη νευροδιέγερση:** διέγερση των νευρικών ινών με ηλεκτρόδια (TENS).
- **Στην αναλγησία:** απελευθέρωση ενδογενών αναλγητικών πεπτιδίων, ανάλογα με τις συχνότητες που επιλέγονται.
- **Στην ηλεκτρολιπόλυση:** αποτελεσματική μείωση στην τοπική λιποδυστροφία.

Έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει **8 διαφορετικές επιλογές θεραπείας**. Ο χρόνος θεραπείας είναι ρυθμιζόμενος από 1 έως 60 λεπτά.

Οι εκάστοτε παράμετροι λειτουργίας προβάλλονται σε οπτική οθόνη.

Ο όρος "DUO" σημαίνει ότι το **AGISTIM DUO** είναι ισοδύναμο με δύο ανεξάρτητες συσκευές ηλεκτρικής διέγερσης που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Έτσι τα 4 κανάλια είναι δυνατόν να λειτουργούν ταυτόχρονα αλλά και ξεχωριστά (2X2).

Κατανέμονται σε δύο ομάδες χρώματος: πράσινου και ροζ.

Η ένταση εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα σε κάθε κανάλι, ενώ οι τιμές συχνότητας και τρόπου λειτουργίας εκπομπής, μπορούν να επιλέγονται ανεξάρτητα σε καθεμία από τις δύο ομάδες. Το **AGISTIM DUO** προσφέρει άριστη ασφάλεια, διακόπτοντας αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής, αν η συχνότητα ή η ένταση του ρεύματος, ξεπερνά τις ανώτατες τιμές.

Οι παλμοί μπορούν να προκληθούν σύμφωνα με:

- Μια οποιαδήποτε συχνότητα μεταξύ 1 και 99 Hz
- Μια από τις **7 συχνότητες NOGIER**, (αυτές οι συχνότητες μεταξύ των 1,14 και 73 Hz είναι καταχωρημένες στη μνήμη της συσκευής).

Η εκπομπή τους μπορεί να γίνει με 4 διαφορετικούς τρόπους:


- Συνεχής εκπομπή παλμών.
- Με σύντομα διαστήματα ανάπαυσης.
- Με μεγάλα διαστήματα ανάπαυσης.
- Με σάρωση συχνότητας.

Το **AGISTIM DUO** επιτρέπει τη σύνδεση έως και 8 βελονών ή ηλεκτροδίων (patch), για **TENS**, με 2 βελόνες ή ηλεκτρόδια ανά κανάλι. Για να αυξηθεί ο παραπάνω αριθμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συσκευή "**4 Needle Module**", η οποία επιτρέπει τη σύνδεση 4 βελονών σε καθένα από τα κανάλια του **AGISTIM DUO**. Στους θεράποντες ιατρούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές ηλεκτρολιπόλυσης, διατίθεται επίσης ένα **KIT LIPOLYSIS**, εξοπλισμένο με 4 συσκευές "**4 Needle Module**", καθώς και ένα ειδικό εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να συνδεθούν 16 βελόνες, για ηλεκτρολιπόλυση. Τα διαφορετικά χρώματα των καλωδίων επιτρέπουν τον εύκολο εντοπισμό.

Το set του **AGISTIM DUO** παραδίδεται μέσα σε βαλιτσάκι μεταφοράς το οποίο περιέχει:

- ✓ Τη βασική μονάδα **AGISTIM DUO**.
- ✓ Το τροφοδοτικό ισχύος ασφαλείας.
- ✓ Τη μονάδα ελέγχου (Test box). Αυτή επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία του **AGISTIM DUO** και την κατάσταση των ηλεκτροδίων.
- ✓ 4 ηλεκτρόδια για βελόνες (Προσαρμογή 2 βελονών σε κάθε ηλεκτρόδιο).
- ✓ 4 ηλεκτρόδια διέγερσης (patch) (Ø 30mm - στρογγυλα), για **TENS**.
- ✓ 1 εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.

4 NEEDLE MODULE

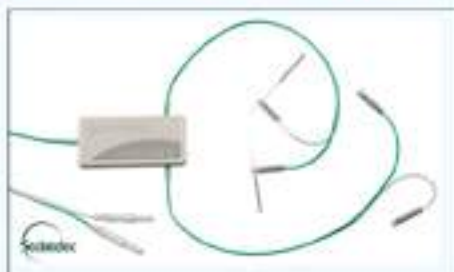

AM0052 € 110

Η μικροσυσκευή **4 needle module**, επιτρέπει τη σύνδεση 4 αντί για 2 βελονών, σε κάθε κανάλι εξόδου του **AGISTIM DUO**.

Δυνατότητα σύνδεσης ως και 16 βελονών.

Ηλεκτρόδιο για βελόνες



AM0057 € 32,26

Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO** και δίνει τη δυνατότητα χρήσης 2 βελονών.

Προέκταση ηλεκτροδίου



AM0056 € 32,26

Συνδέεται στο ηλεκτρόδιο με κωδ: **AM0057** για να παρέχει μεγαλύτερο εύρος κίνησης του ηλεκτροδίου.

Ηλεκτρόδιο διέγερσης (patch) Ø 30mm - στρόγγυλο



AM0150 - 4 τεμάχια € 16,13

Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO** και χρησιμοποιείται για διαδερμική ηλεκτρική διέγερση (**TENS**).

Ηλεκτρόδιο διέγερσης (patch) 50mm X 50mm - τετράγωνο



AM0151 - 4 τεμάχια € 16,13

Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO** και χρησιμοποιείται για διαδερμική ηλεκτρική διέγερση (**TENS**).

KIT LIPOLYSIS



AM0051 € 400

Set των **4 needle modules** τα οποία χρησιμοποιούνται στον ηλεκτροβελονισμό ή την ηλεκτρολιπόλυση. Μπορείτε έτσι να συνδέσετε ταυτόχρονα μέχρι 16 βελόνες. Συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα με **οδηγίες για την ηλεκτρολιπόλυση**. Συνδέεται στη συσκευή **AGISTIM DUO**.

ES 160 - ITO



AM0061 € 650

- ✓ Ηλεκτροβελονισμός
- ✓ Μέτρηση των σημείων Ryodoraku
- ✓ Ανίχνευση σημείων βελονισμού

Εφαρμογές:

- Ανίχνευση των σημείων βελονισμού και εντοπισμός των σημείων πυροδότησης (trigger points).
- Έξι ανεξάρτητα κανάλια για την ηλεκτροδιέγερση με βελόνες.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

- Επιτρέπει την ταυτόχρονη διέγερση δώδεκα βελονών βελονισμού.
- Παρέχει οκτώ διαφορετικούς τρόπους διέγερσης.
- Αποθηκεύει τις παραμέτρους των προηγούμενων θεραπειών. Έχει δεκαέξι προγραμματισμένες θέσεις μνήμης.

- Επιτρέπει στο χρήστη την εύρεση και διέγερση σημείων βελονισμού.
- Ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλούς λειτουργίας, όπως:
 - Αυτόματος έλεγχος κατά την έναρξη λειτουργίας.
 - Αδυναμία έναρξης λειτουργίας της συσκευής εφόσον δεν είναι κλειστά όλα τα κανάλια.
 - Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά.
 - Ένδειξη λειτουργίας της μπαταρίας.
 - Πλήκτρο παύσης σε έκτακτη ανάγκη.
 - Ήχος λειτουργίας, με on/of.
 - Τονικό σήμα τέλους της θεραπείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή ρεύματος: 4 αλκαλικές μπαταρίες (δεν περιέχονται).
- Κανάλια: 6 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα κανάλια.
- Μορφή παλμού: Συμμετρικός διφασικός ορθογώνιος παλμός.
- Εύρος παλμού: 50-400 us, ρυθμιζόμενο.
- Χρόνος θεραπείας: 0-60 λεπτά, ρυθμιζόμενος.
- 3 προρυθμισμένα προγράμματα για την αποφυγή του φαινομένου ανοχής:
 - **πρόγραμμα 1:** 1-6 Hz
 - **πρόγραμμα 2:** 30-100 Hz
 - **πρόγραμμα 3:** 2-100 Hz
- LCD ενδείξεις (οθόνης)
- Διαστάσεις: 239X174X41mm.
- Βάρος: 600 γραμμάρια.

Στη συσκευασία περιέχεται:

- ✓ Η κεντρική μονάδα
- ✓ Probe ανίχνευσης / διέγερσης
- ✓ 6 ηλεκτρόδια για βελόνες
- ✓ 12 clips.

Με την αγορά της συσκευής, δωρεάν το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή pdf, **"Introduction to Japanese Electro-Acupuncture and Ryodoraku - A Treatment Guide"** (Στην Αγγλική γλώσσα, 58 σελίδες).

Probe ανίχνευσης / Διέγερσης



AM0062 € 100

Συνδέεται στη συσκευή **ES 160 - ITO** και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και διέγερση των σημείων βελονισμού.

Ηλεκτρόδιο για βελόνες



AM0065 1 τεμάχιο € 12,10

Συνδέεται στη συσκευή **ES -160 ITO** και δίνει τη δυνατότητα χρήσης 2 βελονών.

Clips ηλεκτροδίου



AM0064 2 τεμάχια € 12,10

Clips για σύνδεση στο ηλεκτρόδιο για βελόνες με κωδικό **AM0065**. Στηρίζουν τις βελόνες που προσαρμόζονται στο ηλεκτρόδιο.

Ηλεκτρική ανίχνευση & διέγερση σημείων βελονισμού

PREMIO 20 D/T



Ηλεκτρικός ανιχνευτής & διεγέρτης των σημείων βελονισμού

Πρακτικό: Χωρίς καλώδια ή αξεσουάρ για εγκατάσταση.

Ακρίβης: 9 επίπεδα διαφορικής ανίχνευσης με LED ενδείξεις.

Καινοτόμο: Συχνότητα κυματισμού κατά τη λειτουργία διέγερσης, ανάμεσα σε 1 και 100 Hz

AM0195 € 605

ΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- Χαμηλής έντασης ρεύμα, για να μην παρεμβάλλεται στο σημείο.
- Συνεχής πίεση του ηλεκτροδίου στην επιδερμίδα.
- Σύστημα ανίχνευσης σημείων βελονισμού, υψηλής ακρίβειας
- Είναι δυνατή η ανίχνευση στη χαμηλή αντίσταση (Gold), ή στην υψηλή (Silver).
- Ένδειξη συνεχούς μέτρησης σε 9 επίπεδα
- Λαβή γείωσης για τον ασθενή

ΔΙΕΓΕΡΣΗ

- Πιέζοντας το πλήκτρο D/T, ενεργοποιείται η διέγερση με τη σάρωση των 7 συχνοτήτων του Nogier (συμπεριλαμβάνεται η συχνότητα 1.14 Hz).
- Αυτόματη προσαρμογή της έντασης διέγερσης: Χωρίς πόνο ή αίσθηση καψίματος.
- Εκπομπή μικρού ηχητικού σήματος που υπενθυμίζει ότι η λειτουργία της διέγερσης σημείων είναι σε εξέλιξη.
- Ο χρόνος διάρκειας ρυθμίζεται από ένα δυνατότερο ηχητικό σήμα κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο D/T, επιστρέφεται στη λειτουργία ανίχνευσης.



ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ & ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- Ειδικό ακροφύσιο "**ERT nozzle**" για την ανίχνευση των σημείων του σώματος.
- Προοδευτικός φωτισμός διόδων ανάλογα με τη μέτρηση.
- Άμεση ανάγνωση της μέτρησης που επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό σήμα.
- Απομνημόνευση του σημείου που ανιχνεύεται με τη χαμηλή αντίσταση.
- Αξιοπιστία: Η λαβή γείωσης που κρατάει ο ασθενής, απομονώνει τον θεραπευτή από το κύκλωμα μέτρησης.

ΔΙΕΓΕΡΣΗ

- Πιέζοντας το πλήκτρο D/T, ενεργοποιείτε την κατάλληλη διέγερση για τις ανάγκες του ασθενούς σας.
- **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Εκπομπή συχνότητας κυματισμού.**
- Θεραπεία με τη σάρωση των συχνοτήτων του Nogier.
- Εκπομπή μετρίου ηχητικού σήματος που υπενθυμίζει ότι η λειτουργία της διέγερσης σημείων είναι σε εξέλιξη.
- Ο χρόνος διάρκειας ρυθμίζεται από ένα δυνατότερο ηχητικό σήμα κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο D επιστρέφετε στη λειτουργία ανίχνευσης.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Αυτός ο τρόπος διέγερσης εξισορροπεί το σημείο και την κυκλοφορία στο μεσημβρινό, με εναλλασσόμενες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις της συχνότητας παλμών.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ (100 ως 1 Hz)

Σε λίγα δευτερόλεπτα θα διασκορπίσετε το Qi (τσι) και θα αφαιρέσετε την ενεργειακή στάση. Η διασπορά επιτυγχάνεται μειώνοντας τη συχνότητα εκπομπής παλμών.

ΤΟΝΩΣΗ (1 ως 100Hz)

Γρήγορη και ελεγχόμενη διέγερση των σημείων βελονισμού. Ενεργοποιεί το αποτέλεσμα, μέσω της επιτάχυνσης της συχνότητας εκπομπής παλμών.

PREMIO 20 D



Ηλεκτρικός ανιχνευτής των σημείων βελονισμού

Πρακτικό: Χωρίς καλώδια ή αξεσουάρ για εγκατάσταση.

Ακρίβης: 9 επίπεδα διαφορικής ανίχνευσης με LED ενδείξεις.

AM0203 € 525

ΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- Χαμηλής έντασης ρεύμα, για να μην παρεμβάλλεται στο σημείο.
- Συνεχής πίεση του ηλεκτροδίου στην επιδερμίδα.
- Σύστημα ανίχνευσης σημείων βελονισμού, υψηλής ακρίβειας
- Είναι δυνατή η ανίχνευση στη χαμηλή αντίσταση (**Gold**), ή στην υψηλή (**Silver**).
- Ένδειξη συνεχούς μέτρησης σε 9 επίπεδα
- Λαβή γείωσης για τον ασθενή

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ & ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

- Ειδικό ακροφύσιο "**ERT nozzle**" για την ανίχνευση των σημείων του σώματος.
- Προοδευτικός φωτισμός διόδων ανάλογα με τη μέτρηση.
- Άμεση ανάγνωση της μέτρησης που επιβεβαιώνεται από ένα ηχητικό σήμα.
- Απομνημόνευση του σημείου που ανιχνεύεται με τη χαμηλή αντίσταση.
- Αξιοπιστία: Η λαβή γείωσης που κρατάει ο ασθενής, απομονώνει τον θεραπευτή από το κύκλωμα μέτρησης.



POINTER EXCEL II



Ανιχνευτής και διεγέρτης σημείων βελονισμού

Το pointer excel II είναι μια συσκευή χειρός, για τον εντοπισμό και τη διέγερση των σημείων βελονισμού και των trigger points. Διαθέτει button για άμεση θεραπεία του σημείου ή της περιοχής με ηλεκτροδιέγερση, αφού ανιχνευθεί το σημείο. Η ψηφιακή οθόνη βοηθά το χρήστη να εντοπίσει το πιο έκδηλο σημείο βελονισμού, καθώς ο αριθμός αυξάνεται με τη μείωση της ηλεκτρικής αντίστασης του δέρματος. Όταν φθάσει στο μέγιστο αριθμό, ένα σημείο βελονισμού ανιχνεύθηκε και η θεραπεία μπορεί ν' αρχίσει. Το νέο αυτό μοντέλο διαθέτει επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως η ρυθμιζόμενη συχνότητα από 1 ως 16 Hz, και διακόπτη αντιστροφής πολικότητας (για τόνωση ή καταστολή). Η συσκευή λειτουργεί με αλκαλική μπαταρία των 9 Volt, (A 9V).

AM0070 € 160

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Την κεντρική μονάδα
- Μπαταρία 9 volt
- Δύο ακροφύσια, 2mm και 4mm
- Λαβή γείωσης
- Λαβίδα ρύθμισης ήχου
- Εγχειρίδιο χρήσης

Βασική αρχή:

Στην επιφάνεια του σώματος, η ηλεκτρική αντίσταση ενός trigger point ή ενός αντανακλαστικού σημείου, είναι χαμηλότερη από τη γύρω περιοχή του. Όταν ο ανιχνευτής αγγίζει ένα σημείο χαμηλής αντίστασης, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, του οποίου η ένταση αυξάνεται, όσο ανιχνεύει σημεία χαμηλότερης ηλεκτρικής αντίστασης. Επίσης η πράσινη ένδειξη LED, θα αναβοσβήνει συνεχώς όταν το σημείο ανιχνευθεί.

Χαρακτηριστικά:

- Η συσκευή διαθέτει ψηφιακή οθόνη, όπου εμφανίζει τη συχνότητα λειτουργίας (από 1 ως 16 Hz) και μια κλίμακα ευαισθησίας ανίχνευσης με μέγιστη ένδειξη το 500.
- Ο διακόπτης πολικότητας επιτρέπει τον τρόπο της διέγερσης και την αντιστροφή από το + (**τόνωση**) στο - (**καταστολή**) και αντιστρόφως, κατά τη διάρκεια της θεραπείας βελονισμού. Κάνοντας την αντιστροφή, θα πρέπει πρώτα να μειωθεί η ένταση για να αποφευχθεί μια απότομη αύξηση της έντασης για τον ασθενή.
- Μόλις ανιχνευθεί το σημείο μπορούμε να πατήσουμε το button Ανίχνευσης / Διέγερσης για την άμεση θεραπεία του σημείου. Επιλέγουμε έναν ηλεκτρικό παλμό από το 1 ως και 16 Hz, στρέφοντας το διακόπτη συχνότητας. Η ένταση επίσης μπορεί να ρυθμιστεί από το 0 ως 22mA. Η ένταση ελέγχεται με το πλήκτρο με την ένδειξη "INT".

- **Εναλλάξιμα ακροφύσια.**

Δύο διαφορετικά ακροφύσια (διαμέτρου, 2mm & 4 mm), παρέχονται για διαφορετικές εφαρμογές. Το μικρότερο είναι κατάλληλο για τα σημεία του ωτός και το μεγαλύτερης διαμέτρου, είναι κατάλληλο για τα σημεία του σώματος.

- **Ρύθμιση ευαισθησίας.**

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία "ευαισθησίας ανίχνευσης". Το πλήκτρο "SEN" χρησιμοποιείται για να αυξήσει ή να μειώσει την ευαισθησία όταν υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες στο δέρμα, (δηλαδή ξηρό ή υγρό δέρμα).

- **Λαβή γείωσης**

Ο ασθενής πρέπει να κρατάει στο χέρι του τη λαβή γείωσης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό το αξεσουάρ συνδέεται και αποσυνδέεται εύκολα από τη συσκευή. **Σημείωση:** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και χωρίς τη **λαβή γείωσης**. Σ' αυτή την περίπτωση, ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε επαφή με την **πλάκα γείωσης** (τη μία εκ των δύο της συσκευής) και παράλληλα να είναι σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς, για να ολοκληρωθεί το ηλεκτρικό κύκλωμα.

- **Διακόπτης ρύθμισης συχνότητας**

Ρυθμίζει τη συχνότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, επιλέγοντας από 1 ως 16 Hz. Η επιλεγμένη συχνότητα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

- **Πλάκες γείωσης**

Υπάρχουν δύο πλάκες γείωσης, η μια στο μπροστινό αριστερό μέρος της συσκευής και η άλλη στο κάτω μέρος.

Διέγερση σημείων βελονισμού με LASER

PREMIO 30 LASER DUO

Ειδικά σχεδιασμένο για το βελονισμό



Είναι ένα αποτελεσματικό, ανώδυνο και εργονομικό laser. Παρέχει μέσω υπέρυθρης ακτίνας laser, διέγερση στα **σημεία βελονισμού** (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του προσώπου), στα **σημεία του ωτός** και στα **trigger points**.

AM0241 € 1800

Καινοτομία: Κυματισμός των συχνοτήτων για την αναζωογόνηση του Qi

• **Αναζωογόνηση του Qi**

Παραδοσιακά, ανάλογα με τα σημεία που θέλουμε να προσεγγίσουμε, χρησιμοποιούμε διαδικασία περιστροφής της βελόνας, εισάγοντας τη βαθειά στους ιστούς, ή τραβώντας την, για να επαναφέρουμε την ενέργεια Qi (Τσι). Μπορούμε επίσης να πετύχουμε παρόμοιο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική, ή LASER διέγερση στο σημείο βελονισμού, σε μια συγκεκριμένη συχνότητα η οποία προκαλεί την αντίδραση, αν και γνωρίζουμε ότι αν αυτή η συχνότητα παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα, ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται στην επιπλέον διέγερση.

• **Νέα καινοτομία της SEDATELEC: Wobulation (κυματισμός)**

Η SEDATELEC έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, που δεν βασίζεται πλέον στις επαναλαμβανόμενες συχνότητες, αλλά στη δυναμική, την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση, καθώς η διακύμανση του σήματος της ακτίνας laser, θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση της πληροφορίας που αποκωδικοποιεί το σώμα.

Αυτό που είναι σημαντικό για ένα ζωντανό οργανισμό, είναι η δυναμική, η αλλαγή και η μεταβολή. Αυτή είναι η βασική αρχή της συχνότητας **Wobulation (κυματισμός)**, στην οποία αναφέρεται και η συσκευή **PREMIO 30 LASER DUO**.

3 Τρόποι διέγερσης στο βελονισμό:

01

ΤΟΝΩΣΗ (100 ως 10.000 Hz)

Ελεγχόμενη ταχεία διέγερση των σημείων βελονισμού. Επιτάχυνση του ρυθμού της εκπομπής των παλμών έχοντας ένα αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

02

ΔΙΑΣΠΟΡΑ (10.000 ως 100 Hz)

Σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείτε να διασπείρετε το Qi και να καταργήσετε την ενεργειακή στάση. Η διασπορά επιτυγχάνεται με επιβράδυνση του ρυθμού της εκπομπής των παλμών.

03

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Αυτός ο τρόπος διέγερσης εξισορροπεί το σημείο και την κυκλοφορία στο μεσημβρινό, με εναλλασσόμενες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις της συχνότητας παλμών.

Λειτουργία ειδικά σχεδιασμένη για την Ωτοϊατρική

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

Αυτή η λειτουργία εγγυάται τη διέγερση των παθολογικών σημείων στην ωτοθεραπεία (πόνος, φυσιολογικές ή λειτουργικές διαταραχές, εθισμοί κ.λπ). Επιτρέπει διαδοχικές εκπομπές με σάρωση όλων των συχνοτήτων **Nogier** (Συχνότητες **A** ως **G**).

Αποτελεσματική θεραπεία

- **Μήκος κύματος 905nm.**

Αυτό απορροφάται λιγότερο από το δέρμα, το νερό και την αιμοσφαιρίνη και είναι ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικό στη δράση του, στον πυρήνα του κυττάρου.

- **2 προσαρμοσμένες δυνατότητες:**

15W: Χαμηλή ισχύ, για επιφανειακά σημεία (πρόσωπο, αυτί).

40W: Υψηλή ισχύ, για τα βαθύτερα σημεία (άλλα σημεία του σώματος).

- **Χρόνος παλμού,** πολύ σύντομος: Περίπου 100ns

Εργονομικό:

- 4 προγράμματα για τη θεραπεία.
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Λειτουργία για περίπου 10 ώρες συνεχόμενης χρήσης.
- Αφαιρούμενο κλειδί LASER, που απαιτείται για τη λειτουργία.


Παρέχεται με:

- Μια θήκη μεταφοράς.
- Μια συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας.
- Ένα ζευγάρι προστατευτικά γυαλιά.
- Ένα φορτιστή.

* Το **PREMIO 30 LASER DUO** εκπέμπει αόρατο φως. Μην εκθέτετε χωρίς προστασία τα μάτια σας, στην ακτίνα του LASER.



Προπλάσματα

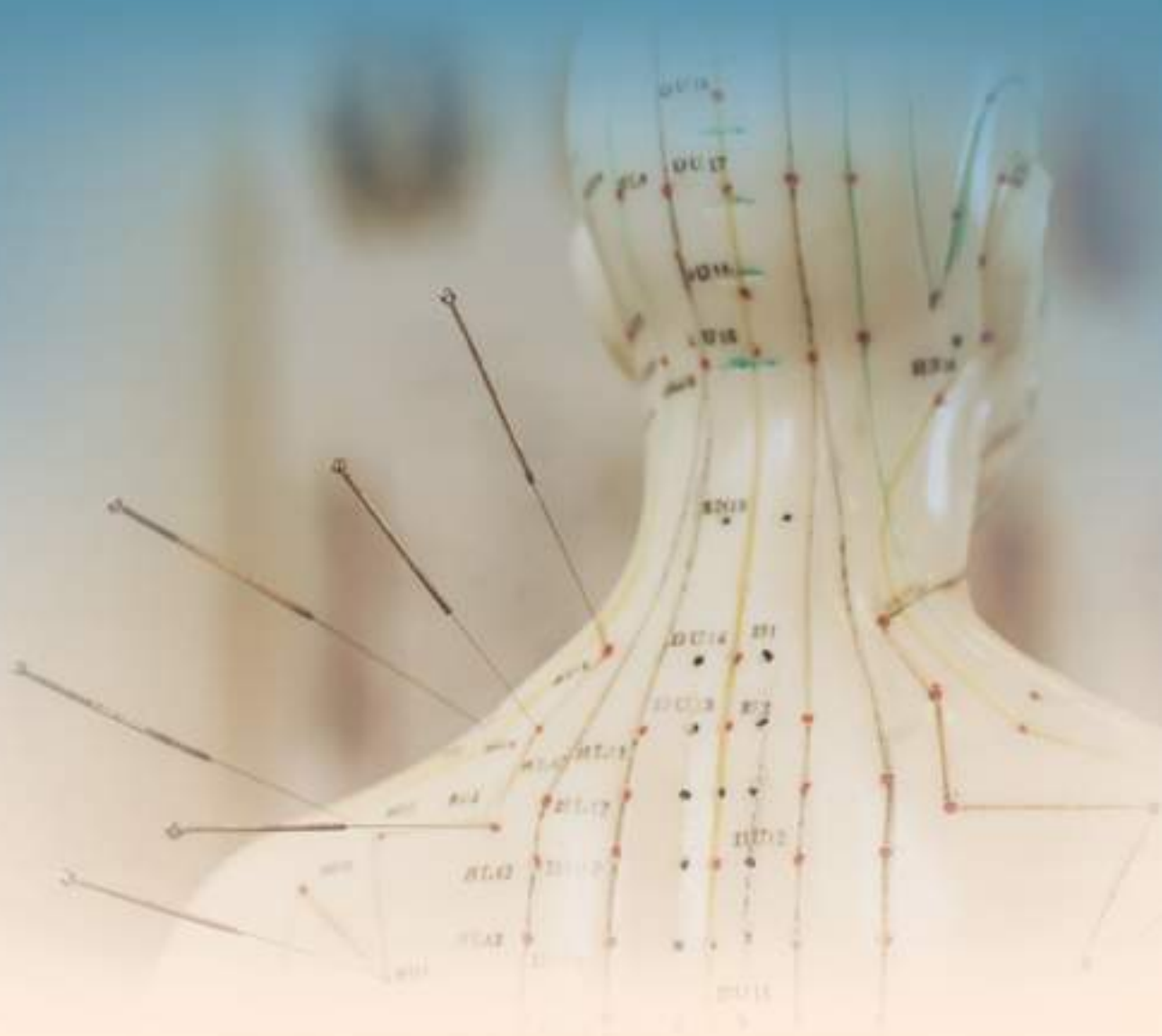

Πρόπλασμα ανδρός με ξύλινη βάση - 55 cm



Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό. Στη δεξιά πλευρά απεικονίζει τους μυς του σώματος και στην αριστερή τα σημεία βελονισμού, αριθμημένα με την αγγλική ονοματολογία και με κινέζικους χαρακτήρες.

AM0078 € 40

Πρόπλασμα ανδρός με πλαστική βάση - 50 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού, τους μεσημβρινούς, τους παράδοξους μεσημβρινούς, τα έξτρα σημεία και τα νέα σημεία. Περιλαμβάνει 361 σημεία βελονισμού σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία και 80 έξτρα σημεία.

AM0079 € 28,23

Πρόπλασμα ανδρός με ξύλινη βάση - 50 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού και τους μεσημβρινούς.

AM0080 € 28,23

Πρόπλασμα γυναικός με πλαστική βάση - 46 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού, τους μεσημβρινούς, τους παράδοξους μεσημβρινούς, τα έξτρα σημεία και τα νέα σημεία. Περιλαμβάνει 361 σημεία βελονισμού σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία και 80 έξτρα σημεία.

AM0081 € 28,23

Πρόπλασμα ανδρός - 26 cm



Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού.

AM0082 € 16,13

Πρόπλασμα κεφαλής - 20 cm



Ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από μαλακό καουτσούκ, σε λευκό χρώμα. Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού και τα αριθμεί σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία. Περιλαμβάνει εγχειρίδιο στα αγγλικά.

AM0083 € 12,10

Πρόπλασμα κεφαλής - 21 cm



Ανατομικό μοντέλο ανθρώπινου κεφαλιού από μαλακό καουτσούκ, σε λευκό χρώμα. Απεικονίζει τα σημεία βελονισμού και τα αριθμεί σύμφωνα με την αγγλική ονοματολογία. Περιλαμβάνει εγχειρίδιο στα αγγλικά.

AM0242 € 12,10

Ανατομικό μοντέλο αυτιών (ζευγάρι) - 8 cm



Απεικονίζουν τα σημεία ωτός, αριθμημένα από το 1 ως το 57. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο στα αγγλικά, στο οποίο υποδεικνύεται το όνομα και η θέση των κύριων σημείων του ωτός.

AM0084 € 12,10

Ανατομικό μοντέλο αριστερού ωτός - 13 cm



Απεικονίζει τα σημεία ωτός. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο στα αγγλικά, στο οποίο υποδεικνύεται το όνομα και η θέση των κύριων σημείων του ωτός.

AM0085 € 8,06

Ανατομικό μοντέλο αριστερού ωτός με ξύλινη βάση - 22 cm



Απεικονίζει τα σημεία ωτός. Περιλαμβάνεται εγχειρίδιο στα αγγλικά, στο οποίο υποδεικνύεται το όνομα και η θέση των κύριων σημείων του ωτός.

AM0086 € 8,06

Ανατομικό μοντέλο αυτιών από σιλικόνη (ζευγάρι) - 7,5 cm



Μαλακό υλικό για την εύκολη εισδοχή των βελονών.
Τα σημεία βελονισμού δεν αναγράφονται.
Συνιστάται για πρακτική εξάσκηση.
Χρώμα: Λευκό

AM0245 € 20,16

Μοξοθεραπεία

Η **Μοξοθεραπεία** είναι μια τεχνική που συνδέεται στενά και συχνά ασκείται παράλληλα με το βελονισμό. Είναι η εφαρμογή θερμότητας σε ειδικά σημεία και περιοχές του σώματος. Η θερμότητα παράγεται από βότανα που καίγονται. Συνήθως χρησιμοποιείται η **αψιθιά** (*Artemisia Vulgaris*). Η θερμότητα δυναμώνει την ζωτική ενέργεια και ελευθερώνει τη ροή της.



ΜΟΧΑ πούρα



AM0094 10 τεμάχια € 12,10

Αυτός ο τύπος μοχα παράγεται από ένα μείγμα φυτών, μεταξύ των οποίων είναι και η Αρτεμισία. Το μήκος κάθε πούρου είναι 21,5cm και κατά την καύση παράγεται καπνός.

ΜΟΧΑ πούρα (καρβουνάκι)



AM0095 5 τεμάχια € 8,06

Η Αρτεμισία καίγεται και στη συνέχεια συμπυκνώνεται, για να σχηματίσει τη Μοχα καρβουνάκι. Αυτό επιτυγχάνει ελάχιστη παραγωγή καπνού κατά την καύση. Η κοιλότητα στο μέσω του πούρου επιτρέπει την ευκολότερη ανάφλεξη του.

Μήκος 10cm.
Διάμετρος 1,5cm.

Μοχα stick με αυτοκόλλητο



AM0190 180 τεμάχια € 12,10

Αυτός ο τύπος μοχα είναι κατασκευασμένος από καθαρή Αρτεμισία. Ο σχεδιασμός του, επιτρέπει τη συγκέντρωση της θερμότητας στο σημείο βελονισμού που θέλετε να θεραπεύσετε, χάρη στη μικρή οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του stick. Κατά την καύση παράγεται καπνός.

Μοχα stick με αυτοκόλλητο και προστατευτικό πλέγμα



Παρασκευασμένη από καθαρή Αρτεμισία. Κατά την καύση παράγεται καπνός. Stick μεγάλων διαστάσεων 25X25mm και με προστατευτικό πλέγμα στο εσωτερικό του.

AM0202 30 τεμάχια € 20,16

Μοχα ημικομμένων κώνων για βελόνα



Κατασκευασμένοι από καθαρή Αρτεμισία. Χρησιμοποιούνται στην τεχνική "Hot needle", κατά την οποία η θερμότητα μεταφέρεται μέσω της βελόνας στο σώμα, ενισχύοντας το αποτέλεσμα του βελονισμού. Κατά την καύση παράγεται καπνός. Η συσκευασία περιέχει 10 πούρα, ημι-κομμένα σε 10 κώνους το καθένα.

AM0191

100 ημι-κομμένοι κώνοι € 12,10

Μοχα κώνοι για βελόνα (καρβουνάκι)



Κατά την καύση παράγεται ελάχιστος καπνός. Μήκος 1 cm. Διάμετρος 1 cm.

AM0096 200 κώνοι € 12,10

Μοχα κώνοι με αυτοκόλλητο (καρβουνάκι)



AM0097 180 κώνοι € 12,10

Κατά την καύση παράγεται ελάχιστος καπνός.

Μοχα αρωματικών stick με αυτοκόλλητο



AM0201 50 stick € 20,16

Κατά την καύση δεν παράγεται καπνός και εκπέμπεται φρουτώδες άρωμα. Μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στα σημεία βελονισμού, όσο και απευθείας στις επώδυνες περιοχές.

Μοχα κώνοι για βελόνα



AM0098 200 κώνοι € 12,10

Κατασκευασμένοι από καθαρή Αρτεμισία. Χρησιμοποιούνται στην τεχνική "Hot needle", κατά την οποία η θερμότητα μεταφέρεται μέσω της βελόνας στο σώμα, ενισχύοντας το αποτέλεσμα του βελονισμού. Κατά την καύση παράγεται καπνός.

Μοχα Σκόνη



Πρόκειται για υψηλής ποιότητας γνήσια μοχα.
Έχει παρασκευαστεί από φυτά Αρτεμισίας ηλικίας 5 ετών.
Κατά την καύση παράγεται καπνός.

AM0100 500 γραμμάρια € 20,16

Στατήρας



Χρησιμοποιείται για το σβήσιμο ή τη στήριξη του πούρου μοχα.
Είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ατσάλι.
Διάμετρος 1,9cm.

AM0101 € 8,06

Στατήρας με θήκη



Χρησιμοποιείται για το σβήσιμο ή τη στήριξη του πούρου μοχα
και περιέχει θήκη για τη στάχτη από την καμένη μοχα.
Είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ατσάλι.
Διάμετρος 1,9cm.

AM0105 € 8,06

Συσκευή καύσης μοχα



AM0102 € 16,13

Κατασκευασμένη από χαλκό, με ανθεκτική πλαστική χειρολαβή. Χρησιμοποιείται με σκόνη ή κώνους μοχα. Μετακινώντας τη συσκευή γύρω από τις περιοχές που πρόκειται να θεραπευτούν, ή κατά μήκος των μεσημβρινών, με τη θερμότητα που παράγεται από τη μοχα, επιτυγχάνουμε αίσθηση ευεξίας και αποτελεσματική θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής αισθανθεί έντονη ζέση, χρησιμοποιούμε ένα λεπτό ένδυμα μεταξύ της συσκευής και του δέρματος, για να αποφύγουμε την περίπτωση εγκαύματος. Ενδείκνυται για τη θεραπεία μεγάλων περιοχών του σώματος. Διαστάσεις συσκευής: 5X4cm. Μήκος με τη χειρολαβή: 19cm

Ξύλινο κουτί καύσης μοχα



AM0103 € 16,13

Χρησιμοποιείται με σκόνη ή κώνους μοχα. Το κουτί διαθέτει πλευρικά δύο ρυθμιζόμενα παραθυράκια, για την παρακολούθηση της ταχύτητας καύσης της μοχα. Ενδείκνυται για τη θεραπεία μεγάλων περιοχών του σώματος. Διαστάσεις: 13,5cm X 9,5cm X 10cm.

Spray μοχα



AM0104 100 ml € 12,10

Είναι ένα εξαιρετικό υποκατάστατο της παραδοσιακής μοχα, έχοντας το πλεονέκτημα της άκαπνης μοχα. Συστατικά: Φυσική Αρτεμισία (7%), αλκοόλ (88%) και νερό (5%).
Οδηγίες χρήσης: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε τη μοχα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Στη συνέχεια μπορείτε να εφαρμόσετε αν θέλετε και κάποια πηγή θερμότητας, θερμαντικό λαμπτήρα κ.λ.π.

Κρέμα μοχα



AM0177 20 γραμμάρια € 12,10

Φυσική κρέμα που εφαρμόζεται ως μοξοθεραπεία απευθείας στο δέρμα. Συστατικά: Φασκόμηλο, βαζελίνη, μενθόλη, καμφορά, έλαιο γαρυφάλλου.

Χρήση: Εφαρμόστε την κρέμα μόξα κατά προτίμηση, αφού θερμάνετε την περιοχή με μια θερμαντική λάμπα. Επαναλάβετε τη χρήση της κρέμας 2 ή 3 φορές κατά τη θεραπεία. Διακόψτε τη χρήση αν ο ασθενής αισθανθεί δυσφορία ή δημιουργηθεί αλλεργία (π.χ. εξάνθημα ή κόκκινα σημάδια). Δεν συνιστάται η χρήση σε παιδιά.

Set μοχα με απλικατέρ σώματος



Ανάψτε το πουράκι της συσκευασίας και τοποθετήστε το εντός της συσκευής. Μετακινώντας τη συσκευή γύρω από τις περιοχές που πρόκειται να θεραπευτούν, ή κατά μήκος των μεσημβρινών, με τη θερμότητα που παράγεται από τη μοχα, επιτυγχάνουμε αίσθηση ευεξίας και αποτελεσματική θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής αισθανθεί έντονη ζέστη, χρησιμοποιούμε ένα λεπτό ένδυμα μεταξύ της συσκευής και του δέρματος, για να αποφύγουμε την περίπτωση εγκαύματος. Ενδείκνυται για τη θεραπεία μεγάλων περιοχών του σώματος.



Το σετ αποτελείται από:


1 απλικατέρ από ανοξείδωτο χάλυβα.

10 λεπτά πούρα με κανονική καύση.


1 μπουκαλάκι λάδι των 10 ml, για μασάζ πριν τη χρήση μοχα.

AM0106 € 28,23


Μοχα πούρα για απλικατέρ σώματος

| | |
|---|--|
|  | Πουράκια για το απλικατέρ σώματος με κωδικό: AM0106 |
| AM0109 10 τεμάχια € 12,10 | |

Κουτί για μοχα πούρα - Τρεις υποδοχές

| | |
|--|---|
|  | Κατασκευασμένο από μπαμπού, με πλέγμα προστασίας εντός του κουτιού και μεταλλικό άγκιστρο για συγκράτηση του πούρου. Διαστάσεις 17 X 8 cm. Μέγιστη χρήση: 50 φορές. |
| AM0107 € 12,10 | |

Κουτί για μοχα πούρα - Μία υποδοχή

| | |
|---|---|
|  | Κατασκευασμένο από μπαμπού, με πλέγμα προστασίας εντός του κουτιού και μεταλλικό άγκιστρο για τη συγκράτηση του πούρου. Διαστάσεις 7 X 5 cm. Μέγιστη χρήση: 50 φορές. |
| AM0108 € 8,06 | |

Βιβλιογραφία & Χάρτες Βελονισμού



Θεραπευτικός βελονισμός - ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ



Συγγραφέας:
Ιωάννης Αλεξανδρής
Ειδικός Παθολόγος - Ιατρική
πράξη βελονισμού

Το σύγγραμμα διατίθεται σε μορφή booklet και περιέχει 500 πρωτόκολλα και συγκεντρωτικούς πίνακες. Τα πρωτόκολλα που προτείνονται είναι κράμα από τη διδαχή μου στην Ακαδημία του Πεκίνου και αυτά που συνιστούν έγκριτοι μελετητές - συγγραφείς. Δίδονται ως μια βάση εκκίνησης για τους γιατρούς που θα πρωτοεφαρμόσουν το βελονισμό και όχι μόνο. Με στοιχεία αιτιοπαθογένεσης σύμφωνα με την παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική. Περιέχει 282 έγχρωμες εικονογραφημένες σελίδες.

AM0193 € 65

Δίσκος ανεύρεσης σημείων ωτοβελονισμού




Πρόκειται για έναν πρακτικό δίσκο ανεύρεσης σημείων ωτοβελονισμού για 72 παθήσεις. Με μια περιστροφική κίνηση του δίσκου εμφανίζονται τα πρωτεύοντα και βοηθητικά σημεία.

Εκδότης:
Ιωάννης Αλεξανδρής

AM0210 € 25

Αναλυτικός χάρτης σημείων βελονισμού

| | |
|---|---|
|  <p>Αναλυτικός χάρτης σημείων βελονισμού</p> | <p>Στο 10σέλιδο αυτό έντυπο εντοπίζονται ονομαστικά όλα τα σημεία σωματοβελονισμού και οι μεσημβρινοί που τα περικλείουν.</p> <p>Εκδότης: Ιωάννης Αλεξανδρής</p> |
| <p>AM0208 € 15</p> | |

Ιατρικός Βελονισμός - Η αρχαιότερη σύγχρονη μέθοδος θεραπείας - ΤΟΜΟΣ Α'

| | |
|---|--|
|  <p>Δρ. Δημήτριος Βασιλάκος Ιατρικός Βελονισμός ΤΟΜΟΣ Α'</p> | <p>" Στις 780 σελίδες του βιβλίου, θεωρία και καθημερινή ιατρική πράξη, προσωπική και διεθνής εμπειρία και αποτελέσματα κλινικών μελετών, συμπλέκονται για να αποτυπωθεί βήμα βήμα η θεραπευτική αυτή μέθοδος, με πλήρη τεκμηρίωση. Ο στόχος αυτός υπηρετείται και με την εξαιρετικά παραστατική εικονογράφηση. Υπάρχει κάτι που λείπει κι αυτό είναι τα trigger points και ορισμένα μικροσυστήματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο του Β' τόμου - Μυοπεριτονιακός πόνος και σημεία trigger-". Δρ Δ. Βασιλάκος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας Α.Π.Θ.</p> |
| <p>Συγγραφέας: Δημήτριος Βασιλάκος Καθηγητής Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας Α.Π.Θ.</p> | <p>AM0169 € 120</p> |

Μυοπεριτονιακός πόνος και σημεία trigger - ΤΟΜΟΣ Β'



Συγγραφέας:
Δημήτριος Βασιλάκος
Καθηγητής Αναισθησιολογίας
& Εντατικής Θεραπείας Α.Π.Θ.

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να προσφέρει, σε αυτούς που ασχολούνται με τον πόνο, ένα βοήθημα που περιγράφει λεπτομερείς τεχνικές διάγνωσης και θεραπείας των μυοσκελετικών συνδρόμων πόνου. Πιο ειδικά, αναφέρεται στα μυοπεριτονιακά σύνδρομα πόνου και στα σημεία Trigger, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων πόνου, σε κάθε μυ του σώματος. Με βάση τα επιστημονικά κριτήρια, τη διεθνή βιβλιογραφία, την πολυετή κλινική εμπειρία του συγγραφέα, το ιδιαίτερα πλούσιο υλικό εικόνων και σχημάτων των μυών και του αντίστοιχου προβαλλόμενου πόνου από τα σημεία Trigger, καθώς και των ασκήσεων διάτασης κάθε μυ, περιγράφεται αναλυτικά η θεραπευτική προσέγγιση του συνδρόμου του μυοπεριτονιακού πόνου. Το δεύτερο τμήμα του βιβλίου αναφέρεται στο γαπωνέζικο σύστημα του νέου κρανιακού βελονισμού κατά Yamamoto.

Περιγράφονται λεπτομερώς, η διάγνωση και η θεραπεία επώδυνων συνδρόμων με την τεχνική του συστήματος Yamamoto και την εφαρμογή κρανιοβελονισμού, μέσα από ένα λεπτομερές υλικό εικόνων του κρανίου.

Περιέχει 425 εικονογραφημένες σελίδες.

AM0204 € 80

Ο βελονισμός σήμερα - Ένας πλήρης θεραπευτικός οδηγός

Πρόκειται για ένα δίτομο σύγγραμμα βελονισμού 1050 σελίδων, μεγέθους 29x21cm με άνοιγμα σειράς στα 16εκ., ενώ τα συνήθη βιβλία έχουν πλάτος έντυπης σειράς 12εκ. Στόχος του πονήματος είναι η εκμάθηση του βελονισμού με όσο πιο εύκολο τρόπο γίνεται.



Συγγραφείς:

Ηλίας Κωνσταντινίδης

Ειδικός Ακτινοθεραπευτής -
Ιατρός βελονισμού

Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Χειρουργός Ορθοπαιδικός -
Ιατρός βελονισμού

Μέσα σ' αυτό το έργο περιλαμβάνονται: Όλο το θεωρητικό υπόβαθρο του βελονισμού και όλα τα σημεία βελονισμού. - Όλα τα extra σημεία - Οι οκτώ παράδοξοι μεσημβρινοί - Οι τενοντομυϊκοί και οι ειδικοί μεσημβρινοί - Ο φαρμακευτικός βελονισμός (Homöosiniatrie) - Ο νέος κρανιοβελονισμός κατά Yamamoto (YNSA) - Ο κινεζικός κρανιοβελονισμός - Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα σωματοβελονισμού - Η εισαγωγή στον ωτοβελονισμό - Ο κινεζικός ωτοβελονισμός - Ο ωτοβελονισμός της γαλλικής σχολής με τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού ωτοβελονισμού (κιν. και γαλ., 190σελ.) - Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ωτοβελονισμού - Τα Laser, ως θεραπευτική παρέμβαση, μαζί με τις συχνότητες (σελ.40) - Τα Trigger Points (σελ.48). Το φροντιστηριακού τύπου πόνημα είναι έγχρωμο με δικές μας φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, ώστε να είναι εύληπτο και να αποτελεί σημείο αναφοράς και αναζήτησης ακόμα και για ιατρούς προχωρημένους στο βελονισμό, επειδή συμπεριλαμβάνει και 330 σελίδες θεραπευτικά πρωτόκολλα σωματοβελονισμού και ωτοβελονισμού.

| | | |
|----------|---------------|------|
| Α' ΤΟΜΟΣ | AM0168 | € 65 |
| Β' ΤΟΜΟΣ | AM0205 | € 65 |

Πακέτο χαρτών σωματοβελονισμού & ωτοβελονισμού

Εκδότες:

Ηλίας Κωνσταντινίδης - Ιωάννης Κωνσταντινίδης

Χάρτες σωματοβελονισμού (Πρόσθια, πλάγια και οπίσθια όψη - 3 τεμάχια)

Ένα λεπτομερές πόνημα με επιπλέον έξτρα σημεία, με πολλούς μικρούς και παράπλευρους πίνακες, για την κάλυψη όλης της ύλης του βελονισμού. Φυσικά είναι καταγεγραμμένη όλη η ανθρωποκεντρική κλίμακα (Cun), όπου ήταν δυνατό. Το έργο είναι επίσης έγχρωμο με χαρτί 300gr. και μέγεθος 70X100cm.



Γαλλικός χάρτης ωτοβελονισμού - Κινεζικός χάρτης ωτοβελονισμού (2 τεμάχια).



(Ελαφρώς τροποποιημένοι.
Μεγέθους 70X100cm με χαρτί 200gr).

AM0209 5 τεμάχια € 65

ΑΡΧΑΪΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΥΚΟΛΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΗ

Ηλίας Ι. Κωνσταντινίδης

ΒΟΗΘΕΙΑ!

**Μ' ακούει κανείς;
ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΩ**

ΑΡΧΑΪΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΥΚΟΛΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ - ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΗ

Για υπέρβαρους, αλλά και για πάσχοντες, μη υπέρβαρους



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΛΑΧΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Συγγραφέας:

Ηλίας Κωνσταντινίδης

Ειδικός Ακτινοθεραπευτής - Ιατρός
βελονισμού

Για υπέρβαρους, αλλά και για πάσχοντες, μη υπέρβαρους.

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια τομή στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων.

Αφορά την πλειοψηφία της κοινωνίας μας.

Είναι οδηγός διαφυγής από την παχυσαρκία και ταυτόχρονα από τις χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις της εποχής μας. αναλύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να φθάσετε στο κανονικό βάρος του σώματός σας και να πετύχετε τη μείωση των κινδύνων ζωής.

Το βιβλίο περιέχει 420 σελίδες και μαζί διανέμεται δωρεάν και ένα CD ψυχολογικής υποστήριξης, διάρκειας 60 λεπτών.

AM0206

€ 30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Έργο Ι. Αλεξανδρή:

Πωλείται στην τιμή των 90€ αντί των 105€ και περιλαμβάνει τους κωδικούς: AM 0193 - AM 0210 - AM 0208

Έργο Δρ. Δ. Βασιλάκου:

Πωλείται στην τιμή των 190€ αντί στην τιμή των 200€ και περιλαμβάνει τους κωδικούς: AM 0169 - AM 0204

Έργο Η. Κωνσταντινίδη - Ι. Κωνσταντινίδη:

Πωλείται στην τιμή των 210€ αντί στην τιμή των 225€ και περιλαμβάνει τους κωδικούς:

AM 0168 - AM 0205 - AM 0209 - AM 0206.

Η αρχική τιμή του έργου κατά την έκδοση του, ήταν 395€.

Σημείωση: Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

ΦΠΑ Βιβλίων: 6%

ΦΠΑ Χαρτών 13% (Περιλαμβάνεται και ο **δίσκος ανεύρεσης σημείων**, κωδ: AM 0207)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

- Στις ανωτέρω τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Στα προϊόντα της κατηγορίας **ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΧΑΡΤΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ**, ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ, (βλέπε σχετική σημείωση στη συγκεκριμένη κατηγορία).
- Οι τιμές πώλησης των προϊόντων, δύναται να αλλάξουν άνευ προειδοποίησης.
- Η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν μη πιστό αντίγραφο των φωτογραφιών με κάποιο ή κάποια από τα προϊόντα του καταλόγου, όπως και για λάθος κατανοήσεις εξαιτίας τυπογραφικών λαθών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
[http:// www.acupuncture.gr](http://www.acupuncture.gr)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Μητρ. Ευσταθίου 28, 54454, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310868117 fax: 2310868126 κιν: 6973345712
Email: info@acupuncture.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αργολίδος 64, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ: 2106927421 fax: 2106927422 κιν: 6987466810
Email: athens@acupuncture.gr

Ζητήστε μας τον κατάλογο
"Medical Health & Beauty"
και βρείτε μέσα μια σειρά από προϊόντα όπως:

- ✓ Ιατρικά είδη
- ✓ Είδη φυσικοθεραπείας
- ✓ Προϊόντα υγείας & ομορφιάς
- ✓ Προϊόντα μασάζ και αρωματοθεραπείας
- ✓ Είδη βεντουζοθεραπείας και μαγνητοθεραπείας

